
Как собрать образец кала с помощью семплера

Семплер помогает собрать материал над водой, без контакта с чашей унитаза. Пробу из семплера вы переносите в контейнер, который выдала лаборатория.

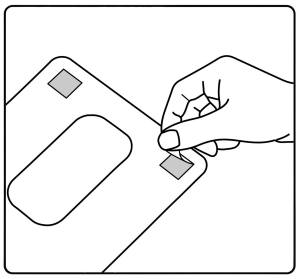


ШАГ 1

Подготовьте семплер

Достаньте семплер из упаковки. Разверните.

Снимите защитное покрытие с клеевых поверхностей по краям изделия.

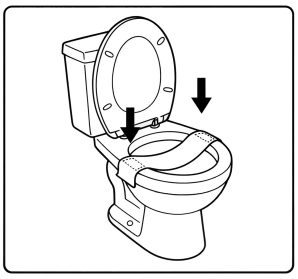

ШАГ 2


Закрепите на ободе

Поднимите сиденье унитаза.

Закрепите семплер на ободе унитаза, используя клеевые поверхности.

Убедитесь, что закреплённый семплер имеет провис посередине.

Опустите сиденье унитаза.

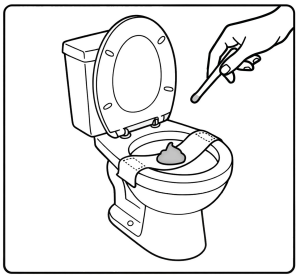

ШАГ 3

Отберите образец

После дефекации произведите отбор образца кала и поместите его в контейнер для сбора биоматериала.



ШАГ 4

Смойте семплер

Открепите семплер с остатками кала и смойте его в унитаз.

Если требуется, повторите смыв.

Видеоинструкция – наведите камеру телефона на QR-код или откройте maxxmed.ru/sampler.

Важно: соблюдайте инструкцию лаборатории по подготовке к анализу, количеству материала, хранению и доставке контейнера.

Семплер одноразовый для отбора образца кала. Бумага водорастворимая. Не предназначен для детей. Не является средством личной гигиены.
По вопросам качества: +7 (916) 741-80-29, info@maxxmed.ru